

REALIZE O PREPARO DE PRP COM


TUBOS PRP



Garanta a obtenção de PRP com a mais alta qualidade.

Os Tubos de PRP da T-LAB foram projetados para uma preparação de PRP rico ou pobre em leucócitos, com alta qualidade e segurança (sistema fechado).

Alta quantidade de plaquetas

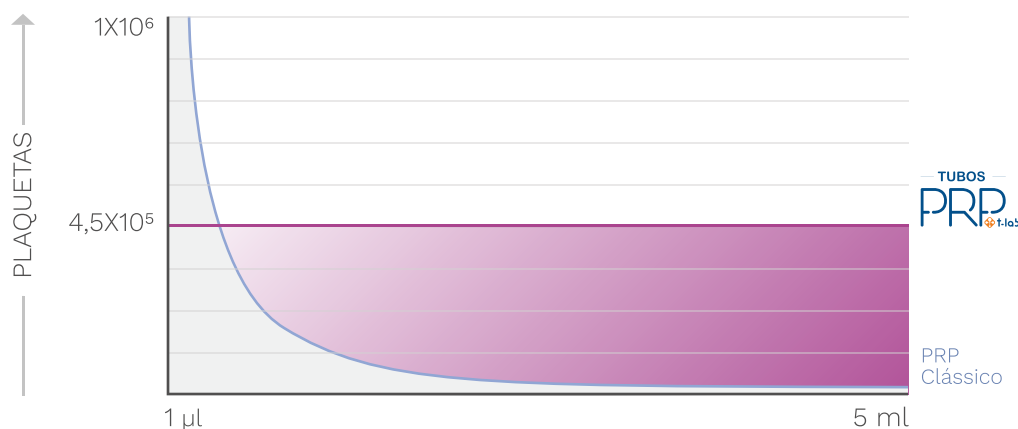

*Número de plaquetas calculado a título de exemplo, com base em uma média de 200.000 pessoas e com uma taxa de recuperação de 80%.

Alta quantidade de plaquetas independente do volume de plasma, com **Tubos de PRP T-Lab.**

Usando tubos comuns ao preparar o PRP Clássico, a quantidade de plaquetas diminui à medida que o volume de plasma aumenta, comprometendo a eficácia.

Os tubos em polietileno tereftalato (PET) recebem um micropolimento especial em seu interior que preserva a integridade das plaquetas para garantir uma concentração superior.


DISPONIBILIZADOS EM UMA CAIXA COM 2 (DUAS) UNIDADES.



Eles possuem capacidade de 10 ml e contêm 1 ml do anticoagulante citrato de sódio (3,2%). Apresentam 9 ml de pressão negativa em tubos (volume total de sangue).


Conheça também a Nexgeen Centrifuge S-106

Projetada especialmente para o preparo de PRP e PRF, é a primeira centrífuga portátil com rotor basculante do Brasil.

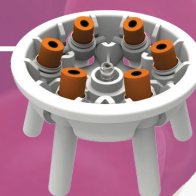

Nas centrífugas com rotor fixo, as plaquetas colidem na parede do tubo causando turbulência. A força aplicada é desproporcional à célula, que sofre aceleração e parada repentinas. Com o rotor basculante da **Nexgeen Centrifuge**, a força é proporcional a cada célula, promovendo uma distribuição de energia suave, além de uma velocidade estável.

Potencialize em 3x uma aplicação de PRP¹

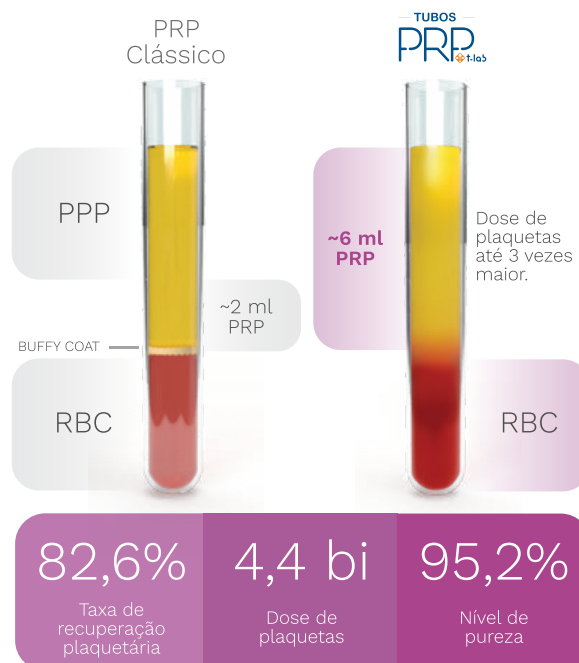

Para o preparo de PRP ou L-PRP com os Tubos de PRP da T-LAB, faz-se necessária a utilização de outros dispositivos, como: adaptador de agulha para coleta a vácuo, agulha 22 G para coleta a vácuo (pode ser substituída por scalp ou outro tamanho de preferência, mantendo o sistema a vácuo), cateter intravenoso 14 G ou 16 G, e seringa luer-lock 3 ml e 5 ml.

IMPORTANTE

A Nexgeen não faz aconselhamento clínico. Os conteúdos apresentados em nossos materiais promocionais, guias técnicos e website possuem apenas finalidade de informação geral. As informações não se destinam a substituir o aconselhamento, diagnóstico ou tratamento de um profissional de saúde. A confiança em qualquer informação fornecida nos nossos materiais promocionais é exclusivamente de sua própria conta e risco, pois as necessidades clínicas de cada indivíduo são muito diferentes. Você jamais pode presumir que estas informações relativas a determinadas condutas de tratamento ou resultados também são aplicadas a você. Em vez disso, você deve avaliar sua condição clínica e tomar decisões de tratamento com base em uma consulta com um profissional de saúde de sua confiança.

REFERÊNCIA

1. Baseado nos resultados da análise imparcial usando a Classificação DEPA, por Jérémy Magalon, PharmaD, PhD, IMCAS Paris 2023

Registro ANVISA: 82251719003



Aponte sua
câmera para o
QR CODE
para saber mais!

Rua Francesco Coppini, 68 - 2º andar
Nova Gerty, São Caetano do Sul - SP | CEP: 09580-000
comercial@nexgeen.com.br +55 (11) 2668 5368
nexgeen.com.br

nexgeen
BIOSOURCE